


**PETUNJUK TEKNIS
PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME -1)
PENGUJIAN SAMPEL AIR
SIKLUS 2 TAHUN 2025**

BAHAN (MARIK) UJI:
AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN AIR HIGIENE, pH

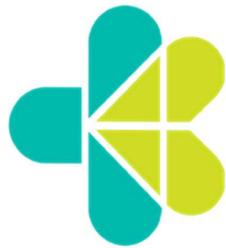

Kemenkes
Labkesmas Palembang I

Balai Besar laboratorium Kesehatan Palembang

Jl. Inspektur Yazid KM. 2,5 Palembang 30126

Telp. 0711 352683 Fax.0711 372527

Email. bblk_palembang@yahoo.co.id

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL - KIMIA AIR
(PNPME-KIMIA AIR)
SIKLUS 2 TAHUN 2025**

1. JADWAL

No	Kegiatan	Jadwal Siklus 2
1	Pembukaan Pendaftaran	02 Januari 2025
2	Batas akhir pendaftaran	22 Juli 2025
3	Pendistribusian Bahan Uji	02 - 17 September 2025
4	Pemeriksaan Serentak	03 Oktober 2025
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	16 Oktober 2025
6	Feedback	17 November 2025

2. APLIKASI PME ONLINE

Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan - 1
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penerapan dokumen petunjuk teknis tahap 1 ini untuk :

1. Matrik Air Minum (AM) dengan parameter Logam Terlarut (Fe, Mn, Cd, Pb, Al, Cu), Anion (F) dan Kekeruhan
2. Matrik Air Limbah (AL) dengan parameter Logam Total (Fe, Mn, Cd, Pb, Al, Cu, Cr), Amonia
3. Matrik Air Hiegene (AH) dengan parameter Logam Terlarut (Fe, Mn, Cu, Zn), Anion (NO3), dan Kekeruhan.
4. Pengujian pH

4. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

Untuk menjamin agar hasil uji yang dilaporkan dapat diolah dengan baik, Laboratorium Peserta Uji dimohon untuk memperhatikan hal – hala sebagai berikut :

a. Kode Laboratorium

1. Masing masing peserta mendapat sampel PNPME sebanyak 3 tabung untuk matrik air minum, 2 tabung untuk matrik air limbah, 3 tabung untuk matrik air hiegene dan 1 tabung untkk pengujian pH
2. Setiap tabung sample PNPME dicantumkan kode atau identitas masing masing. Kode Laboratorium yang spesifik dan dijaga kerahasiaannya oleh Penyelenggara uji profisinesi (PNPME)
Contoh Kode AM.01.25.1; AL.01.25.1 ; AH.01.25.1

b. Sampel PNPME

1. Sampel PNPME yang digunakan adalah Air Minum (AM), Air Limbah (AL) ,Air Higiene (AH) serta Buffer Standard pH
2. Sampel PNPME dikemas dalam tabung ulir gelas bertutup Teflon
3. Setiap peserta yang mendaftar lengkap akan mendapatkan 9 (sembilan) tabung Sampel PNPME dengan kode tabung ulir yang berbeda-beda tiap peserta, dan info jumlah tabung ulir jika keikutsertaan lengkap adalah sebagai berikut :
4. Setelah Sampel Uji diterima di laboratorium peserta, segera buka kemasan luar, kemudian periksa dengan cermat kondisi sampel pada saat diterima (rekam video bila diperlukan)
5. Catat tanggal penerimaan, kondisi sampel saat di terima dan divideokan
6. Sampel yang telah diterima dapat disimpan disuhu $4^0 \pm 2^0$

c. Pengujian Sampel PNPME

1. Parameter uji untuk matrik air minum adalah Logam terlarut (Fe, Mn, Cd, Pb, Al, Cu), Flourida dan Kekeruhan . untuk Matrik Air Limbah adalah Logam Total (Fe, Mn, Cd, Pb, Al, Cu, Cr) dan Amonia. Untuk Air Higiene adalah Logam terlarut (Fe, Mn, Cu, Zn) Nitrat dan Kekeruhan
2. Pengujian dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu Tanggal; 03 Oktober 2025
3. Sebelum dilakukan analisis, Sampel PNPME diberi perlakuan pengenceran terlebih dahulu, petunjuk setiap sampel uji ditetapkan sebagai berikut :

No	Parameter	Petunjuk Pengenceran
1	Logam Air Minum	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
2	Logam Air Limbah	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
3	Logam Air Higiene	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
4	Flourida Air Minum	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
5	Kekeruhan Air Minum	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
6	Amonia Air Limbah	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
7	NO ₃ Air Hiegene	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
9	Kekeruhan Air Hiegene	1 ml konsentrat dalam labu 100 ml, tepatkan dengan air suling sampai batas tera
10	Untuk sampel pengujian pH	Tidak dilakukan pengenceran

4. Selanjutnya analisis dilakukan oleh laboratorium peserta dengan menggunakan metode uji yang digunakan secara rutin pada laboratorium masing-masing.
5. Informasi nilai rentang konsentrasi pengujian yang ditetapkan sebagai berikut :

Air Minum			
No	Paremeter	Rentang Konsentrasi	Satuan
1	Fe (terlarut)	0.05 – 0.500	mg/L
2	Mn (terlarut)	0.05 - 0.500	mg/L
3	Cd (terlarut)	0.001 - 0.500	mg/L
4	Pb (terlarut)	0.005 - 0.100	mg/L
5	Al (terlarut)	0.100 – 0.500	mg/L
6	Cu (terlarut)	0.100 – 1.000	mg/L
7	F	0.100 – 1.000	mg/L
8	Kekeruhan	1.000 – 5.000	NTU
Air Limbah			
No	Paremeter	Rentang Konsentrasi	Satuan
1	Fe (Total)	0.500 – 5.000	mg/L
2	Mn (Total)	0.200 – 1.000	mg/L
3	Cd (Total)	0.010 – 1.000	mg/L
4	Pb (Total)	0.010 – 1.000	mg/L

5	Al (Total)	0.500 – 5.000	mg/L
6	Cu (Total)	0.500 – 5.000	mg/L
7	Cr (Total)	0.200 – 1.000	mg/L
8	NH3 - N	0.500 – 2.000	mg/L
Air Higiene			
No	Parameter	Rentang Konsentrasi	Satuan
1	Fe (terlarut)	0.100 – 0.500	mg/L
2	Mn (terlarut)	0.100 – 1.000	mg/L
3	Cu (terlarut)	0.100 – 1.000	mg/L
4	Zn (terlarut)	0.100 – 1.000	mg/L
5	Anion (NO3)	1.000 – 5.000	mg/L
6	Kekeruhan	1.000 – 5.000	NTU
pH			
1	pH	4 - 10	

d. 1. Pelaporan Hasil Pengujian

- Laboratorium peserta diharuskan melaporkan data hasil pengujian dan menyertakan **estimasi ketidakpastiannya** (jika memungkinkan) dengan mengikuti format pengisian hasil pada aplikasi.
- Pastikan untuk memeriksa hasil pengujian sebelum laboratorium peserta mengirimkan hasil ke aplikasi, termasuk kode laboratorium yang ada pada kemasan Objek uji.
- Pastikan untuk melampirkan semua bukti dokumen pengujian. (di upload di aplikasi)

Hasil Pengujian TIDAK DIKALIKAN dengan nilai pengenceran

- Aturan pelaporan hasil pengujian sebagai berikut:
 1. Semua data parameter hasil pengujian AB dilaporkan mengikuti aturan 3 angka di belakang koma dalam satuan sesuai yang tertera di FR.PUP.KT.001/Rev.0/30.03.17.
 2. Pembulatan angka desimal hasil pengujian diharapkan mengikuti aturan sebagai berikut:
 - a. Jika diperoleh angka desimal kurang dari 5 (lima) maka pembulatan turun,
tapi jika lebih dari 5 (lima) pembulatan naik.

Contoh : 14.5554 dibulatkan menjadi 14,555

14.6766 dibulatkan menjadi 14.677

- b. Jika diperoleh angka desimal 5 (lima) yang akan dibulatkan dari angka genap yang ada di depannya, maka angka 5 (lima) tersebut menjadi hilang, tetapi bila angka di depannya ganjil maka pembulatan akan naik.

Contoh : 14.4665 dibulatkan menjadi 14.466

14.6775 dibulatkan menjadi 14.678

5. Pengisian Tanda Terima Objek Uji Profisiensi

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

6. Rancangan Statistika Pengolahan Data

1. Penilaian Laboratorium

Penilaian terhadap unjuk kerja laboratorium menggunakan z-score dengan tiga kriteria penilaian sebagai berikut:

- Untuk $|z\text{-score}| \leq 2,0$ dikategorikan memuaskan dan diberi lambang **OK**
- Untuk $2,0 < |z\text{-score}| < 3,0$ dikategorikan peringatan dan diberi lambang **\$**
- Untuk $|z\text{-score}| \geq 3,0$ dikategorikan kurang memuaskan dan diberi lambang **\$\$**

2. Penetapan nilai evaluasi uji Profisiensi (assigned value) dirancang menggunakan skema Robust statistic Algorithm A sesuai ISO 13528 ; 2022

3. Penetapan SDPA (standar deviasi yang digunakan dalam evaluasi) dirancang menggunakan skema sebagai berikut:

- Simpangan baku Horwitz (Horwitz Function)

Simpangan baku yang ditetapkan (*assigned SDPA*)

$$SDPA = \frac{\bar{x} \text{Algorithm A} \times \text{CV Horwitz}}{100}$$

4. Penetapan z Score : $z = \frac{xa - \bar{x}}{SDPA}$

7. Entry Hasil Ke Aplikasi PME Online

Isilah hasil pemeriksaan pada Aplikasi hasil pemeriksaan seperti dibawah ini :

- a. Pilih tanggal pemeriksaan bahan uji.
- b. Perhatikan Formulir hasil untuk setiap tabung
- c. Ketik Hasil Pengujian, Ketidakpastian (bila mungkin), Alat dan Metode Pemeriksaan.
- d. Tuliskan nama pemeriksa dan penanggung jawab laboratorium.
- e. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol “simpan” lalu klik “unduh” untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan.
- f. Klik Tombol “kirim” untuk mengirim isian peserta.

8. EVALUASI

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.

9. KERAHASIAN

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

10. FEED BACK

- Hasil akan dirahasiakan hanya disampaikan ke unit Saudara,
- Apabila Saudara memerlukan konfirmasi dalam pelaksanaan PME ini dapat menghubungi:
 - Rahmi Widiawati, SKM, M.Biomed : HP 08127349068
 - Citra Wulandari, SKM, M.Biomed : HP 081373535481

Palembang, Agustus 2025

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang

